
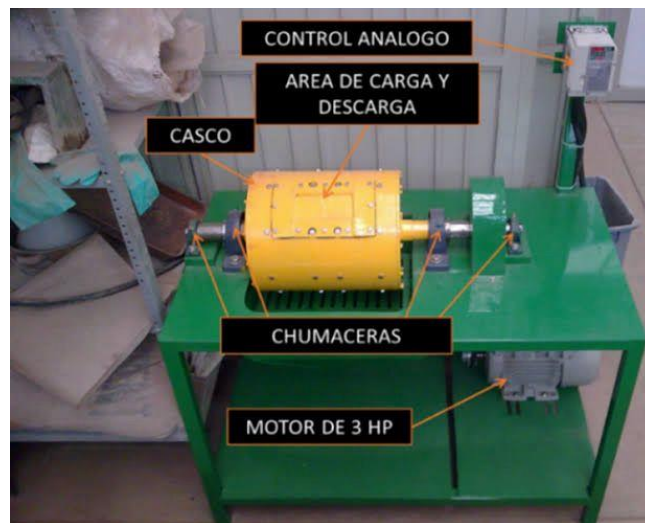
	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</p> <p style="text-align: center;">FACULTAD DE INGENIERÍA Laboratorio de Metalurgia</p>	
<p style="text-align: center;">Guía práctica para el uso y manejo del molino de bolas</p>		

Molino de Bolas

Diagrama del equipo:





Propósito del equipo:

Es usado para darle al mineral la granulometría que es necesaria en cada caso ya sea en seco o en medio acuoso, esto se logra a través de pruebas de el tiempo que se dará en el molino y la carga de bolas que se necesite según lo que se desee.

Principios de operación:

1. Cerciorarse que los fusibles estén encendidos (I).
2. Limpiar con brocha las bolas antes de ser utilizadas.
3. Introducir las bolas junto con el mineral (máx. 1 kg) al molino.
4. Colocar el empaque y seguido la tapa en la parte superior.
5. Colocar el tornillo en el centro donde se encuentra la muesca
6. Colocar la solera por debajo de las cejas del molino.
7. Girar en sentido horario hasta apretar fuertemente.
8. Colocar el molino de forma horizontal en los rodillos.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</p> <p style="text-align: center;">FACULTAD DE INGENIERÍA Laboratorio de Metalurgia</p>	
<p style="text-align: center;">Guía práctica para el uso y manejo del molino de bolas</p>		

9. Presionar el botón verde para poner en funcionamiento el molino
10. Al término del uso del molino poner a remojar las bolas en Cal

Precauciones para el manejo del equipo:

Asegurarse de que el molino esté bien cerrado antes de ponerlo a girar.

Asegurarse de poner un recipiente en la zona de descarga para que no se tire el mineral molido.