


	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</p> <p style="text-align: center;">FACULTAD DE INGENIERÍA Laboratorio de Metalurgia</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Guía práctica para el uso y manejo del separador magnético</b></p>		

## Separador Magnético

### Diagrama del equipo:

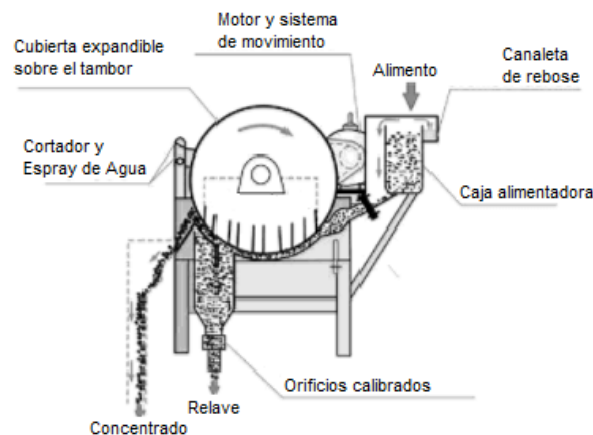

### Propósito del equipo:

Se utilizan para separar partículas magnetizables de fluidos de procesos, lodos y emulsiones. Gracias a unos campos magnéticos de alta intensidad, permiten la separación eficiente de magnetita del medio húmedo.

### Principios de operación:

1. Asegurarse de que la máquina esté limpia, antes de empezar con su uso.
2. Jalar el botón rojo para su encendido y con la perilla de abajo, controlar la velocidad de rotación
3. Del lado izquierdo del mecanismo se lleva la alimentación del mineral y por el lado derecho cae el concentrado.

### Precauciones de manejo de equipo:

No dejar que se acumule el mineral magnético e intentar quitarlo con agua.