


	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</p> <p style="text-align: center;">FACULTAD DE INGENIERÍA Laboratorio de Metalurgia</p>	
Guía práctica para el uso y manejo del Ro-Tap		

Ro-Tap

Diagrama del equipo:

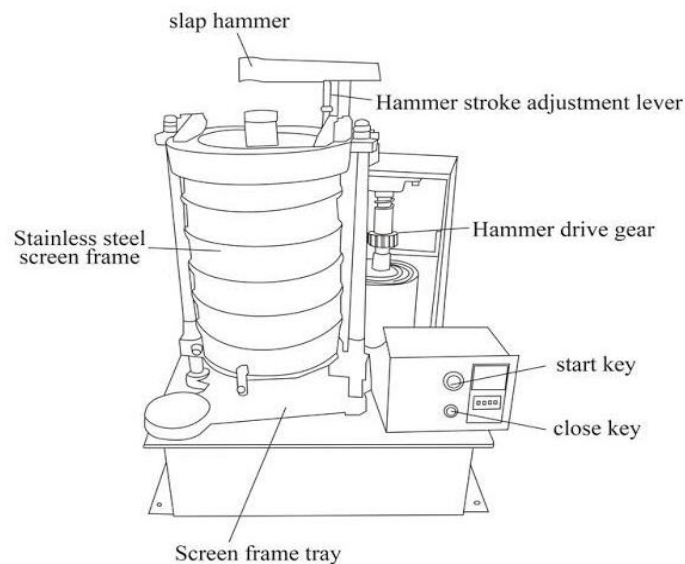


Componentes del equipo:

1. Slap hammer (martillo golpeador)
2. Stainless Steel screen frame (marco de acero inoxidable).
3. Screen frame tray (bandeja de marco)
4. Close key (cerrar llave) start key (llave de inicio)
5. Hammer drive gear (engranaje de martillo)
6. Hammer stroke adjustment lever (palanca de ajuste del martillo)

Propósito del equipo:

Se utilizan para el análisis de laboratorio de granulometría y manejan una serie de tamices con diferentes diámetros que se ensamblan en una columna. La columna de tamices se somete a vibración y movimientos rotatorios intensos por el tamizador

	<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</p> <p style="text-align: center;">FACULTAD DE INGENIERÍA Laboratorio de Metalurgia</p>	
Guía práctica para el uso y manejo del Ro-Tap		

Principios de operación:

1. Seleccionar las mallas según su conveniencia y apilarlas de la más grande a la más chica, luego de esto insertarlas en el ROTAP, cuidando su correcto ensamblaje. Encender el ROTAP por el tiempo deseado.
2. Colocar la tapa de contrapeso en la parte superior de la torre y el recipiente cerrado en la parte de abajo.

Precauciones del manejo del equipo:

Acomodar correctamente los tamices.